


Restaurations IPS e.max®

		IPS e.max Ceram/ZirPress	IPS e.max ZirCAD	IPS e.max CAD/Press
Antérieures	Couronnes		✓	✓
	Facettes	✓		✓
	Ponts		✓	✓
Postérieures	Couronnes		✓	✓
	Ponts		✓	

Guide de préparation en cabinet – Restaurations antérieures

Restaurations complètes

PRÉPARATION D'UNE COURONNE ANTÉRIEURE

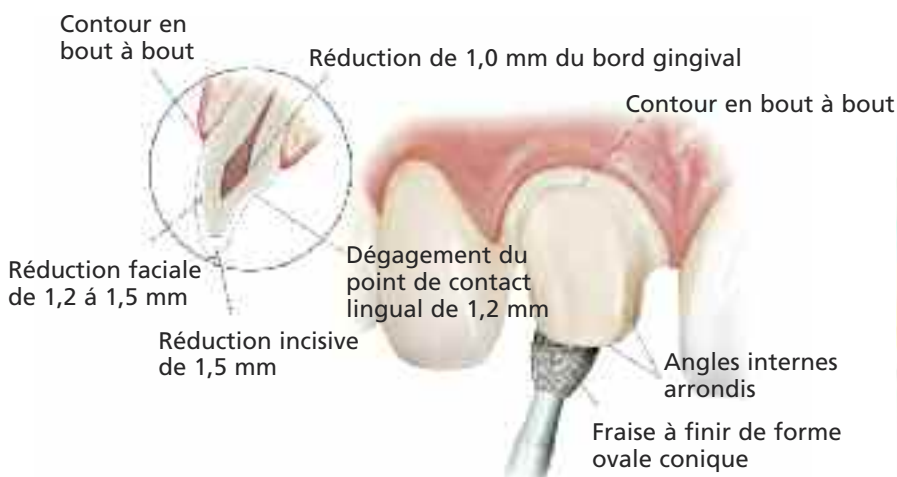

Restauration d'un pont à 3 unités

PRÉPARATION D'UN PONT À 3 UNITÉS




Facettes

PRÉPARATION D'UNE FACETTE

Une fraise diamantée à extrémité arrondie et grain moyen est utilisée pour retirer une couche uniforme d'émail facial, par fusion des sillons de profondeur de coupe.

La fraise diamantée est inclinée pour tailler le bord incisif en biseau.

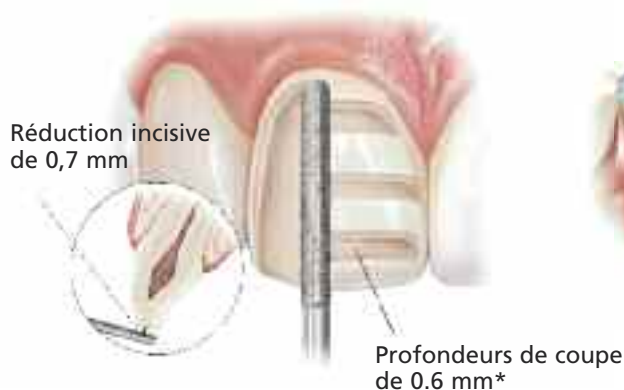

Facettes fines

IPS e.max peut être appliqué en facette d'épaisseur allant jusqu'à 0.3mm. Lorsque l'espace le permet, IPS e.max peut être sur la dent existante sans endommager sa structure. Selon les cas, il peut toutefois être nécessaire de préparer la dent pour accueillir l'épaisseur de la céramique et assurer un contour et un profil d'émergence adapte.




Inlays/Onlays

PRÉPARATION D'INLAYS




PRÉPARATION D'ONLAYS

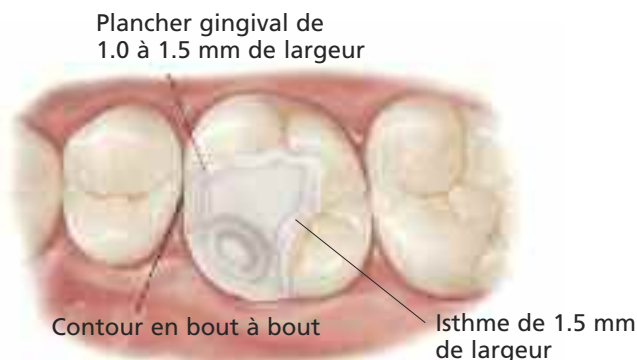


Restaurations d'un pont à 3 unités

PRÉPARATION D'UN PONT À 3 UNITÉS

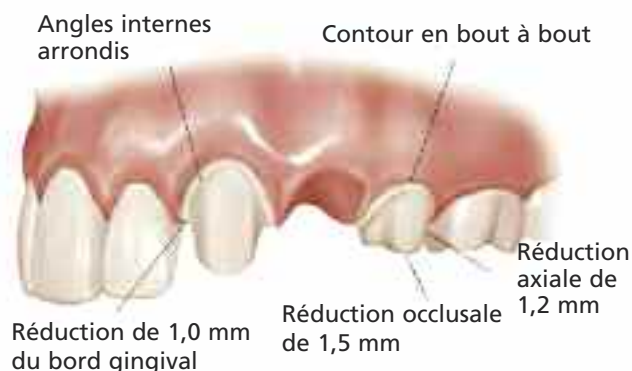


Restaurations complètes

PRÉPARATION D'UNE COURONNE POSTÉRIEURE

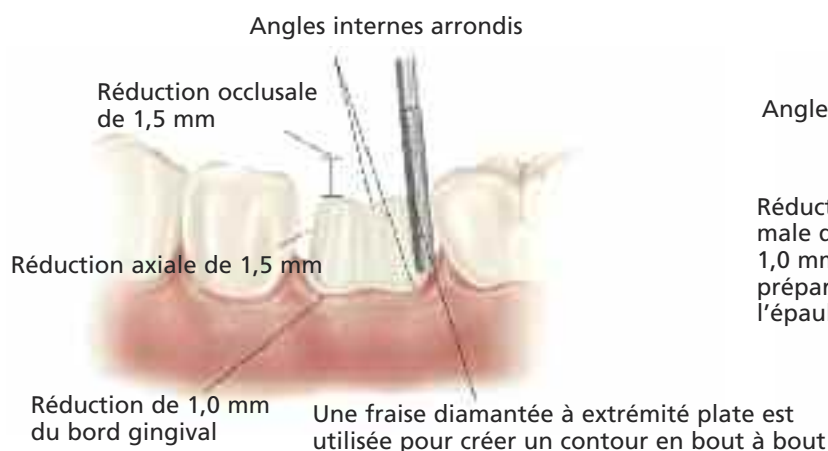

PRÉPARATION D'UN SCÈLEMENT CLASSIQUE

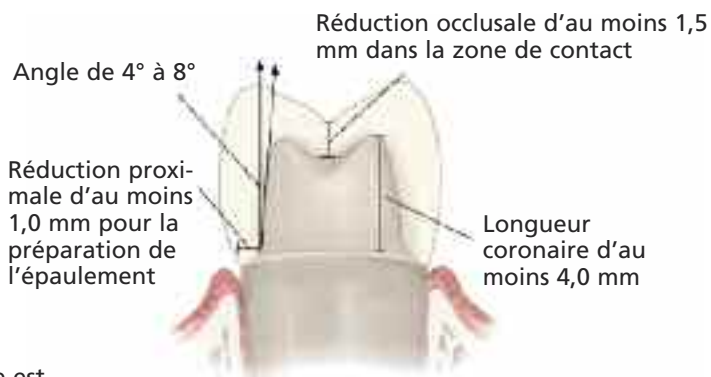

Si on préfère un rebord en céramique stratifiée ou pressée sur une structure en zircone, on peut obtenir une meilleure esthétique gingivale avec un épaulement de 90 degrés.